

Gäller för: Verksamhet hälsoprofessioner och radiologi barn  
Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska  
Granskad av: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska  
Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-13

Giltig till: 2028-05-13

## MR - Ländrygg

**Us kod/Us namn:** M 24000, M24000N

**Undersökningstid:** 45 minuter  
90 min vid undersökning i narkos

**Indikation:** -

**Förberedelser:** - [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),  
och patient-ID kontrolleras inför undersökning.  
- MR-säkra kläder

**System:** - 1,5T eller 3T på SU/DSBS

**Patientpositionering:** - Hörselskydd och larm knapp tilldelas samtliga patienter.

**Patientcentrering:** - Mitt på ländryggen

**Spole:** - Ryggspole

**Kontrastmedel:** -

**Kontrastinjektion:** -

**Läkemedel:** -

**Sekvenser/Kriterier:**

	<b>Sekvens</b>	<b>Snitt-plan</b>	<b>Snitt-tjocklek</b>	<b>Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)</b>
1	Lokaliser	3 plan	-	Ländrygg
2	T2 STIR	Cor	-	Täck ländryggen
3	T2 FSE	Sag	-	Täck ländryggen
4	T1 FSE	Sag	-	Täck ländryggen
5	T2 FSE	Ax	-	Om inga buktande diskar kör L3-S1

**Vid behov:**


**Sekvenser/Kriterier:**

	<b>Sekvens</b>	<b>Snitt-plan</b>	<b>Snitt-tjocklek</b>	<b>Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)</b>
6	T1 FSE	Ax	-	Täck aktuellt område. Parallellt med diskarna

**Kommentar:**

Axiella snitt parallellt med de sjuka diskarna. Flera stackar vid behov!

Om flera stackar behövs att komma in i diskarna, skall dessa gå omlott.

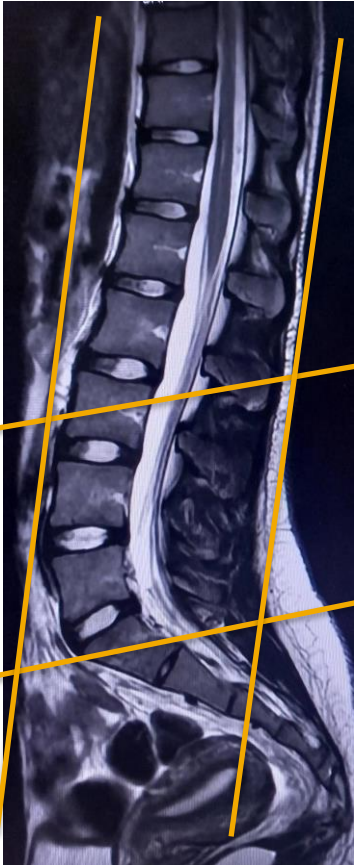

**Cor och Ax**

**Granskare/ arbetsgrupp:**

Pär-Arne Svensson specialsjuksköterska Radiologi barn

Jenny Ahlin specialistläkare Radiologi Barn

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet hälsoprofessioner och radiologi barn

**Innehållsansvar:** Izabela Kasperska, (izaka),  
Specialsjuksköterska

**Granskad av:** Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska

**Godkänd av:** Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-1327

**Version:** 14.0

**Giltig från:** 2026-05-13

**Giltig till:** 2028-05-13