

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2026-05-17

Innehållsansvar: Linda Clausen, (lincl2), Specialröntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-05-12

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

## MR Skulderblad 77B Tumör/Infektion Gd.

**Us kod/Us namn:** M77900D, M77900S  
MR Skulderblad 77B Tumör/Infektion Gd.

**Undersökningstid:** 45 min.

**Indikation:** Tumör, infektion, abscess.

**Förberedelser:** [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#)  
och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

Patient ska bära MR-säkra kläder.

PVK eller annan fungerande infart.

Markera eventuellt aktuellt område med E-vitaminkapslar.

**System:** 1,5T eller 3T på SU/M.

**Patientpositionering:** Ryggläge, huvudet först. Aktuellt skulderblad ska placeras så nära isocenter som möjligt. Vinkla eventuellt patienten lätt för att möjliggöra detta. Hörselskydd och larmknapp tilldelas samtliga patienter.

**Patientcentrering:** Axelleden.

**Spole:** Basecoil huvud + Anterior body coil.



**Kontrastmedel:** Clariscan 0,5mmol/ml. Dosering 0,2ml/kg kroppsvikt.


**Kontrastinjektion:** 2 ml/s. Efterspolning med Natriumklorid 9mg/ml.

**Läkemedel:** -


**Sekvenser/Kriterier:**

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
1	Survey	3 plan		
2	T2 DIXON tse	Cor	4 mm	Vinkla parallellt med scapula och axelleden. Täck hela scapula eller aktuellt område.
3	T1 DIXON tse	Tra	4 mm	Lägg snitten transversellt genom scapula och axelleden. Täck hela scapula eller aktuellt område.
4	Gd-injektion	-	-	Clariscan 0,5mmol/ml. Dosering 0,2ml/kg kroppsvikt. Maxdos 20ml.
5	Gd T2 tse	Tra	4 mm	Lägg snitten transversellt genom scapula och axelleden. Täck hela scapula eller aktuellt område.
6	Gd T1 DIXON tse	Tra	4 mm	Lägg snitten transversellt genom scapula och axelleden. Täck hela scapula eller aktuellt område.
7	Gd T1 DIXON tse	Cor	4 mm	Vinkla parallellt med scapula och axelleden. Täck hela scapula eller aktuellt område.
8	Gd T1 DIXON tse	Sag	4 mm	Vinkla sagittellt genom scapula och axelleden. Täck hela scapula eller aktuellt område.


**Vinkling  
Tra**

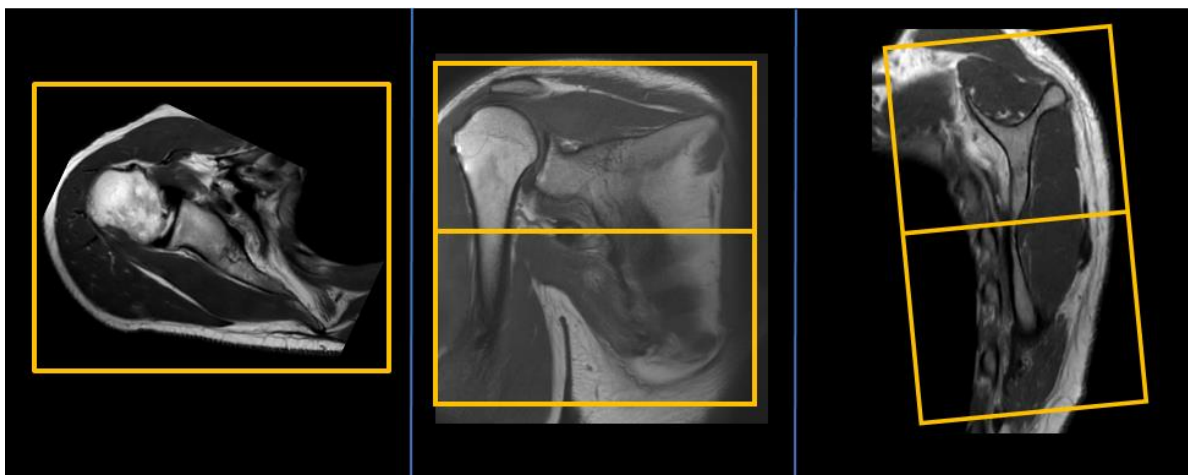

**Vinkling  
Cor**

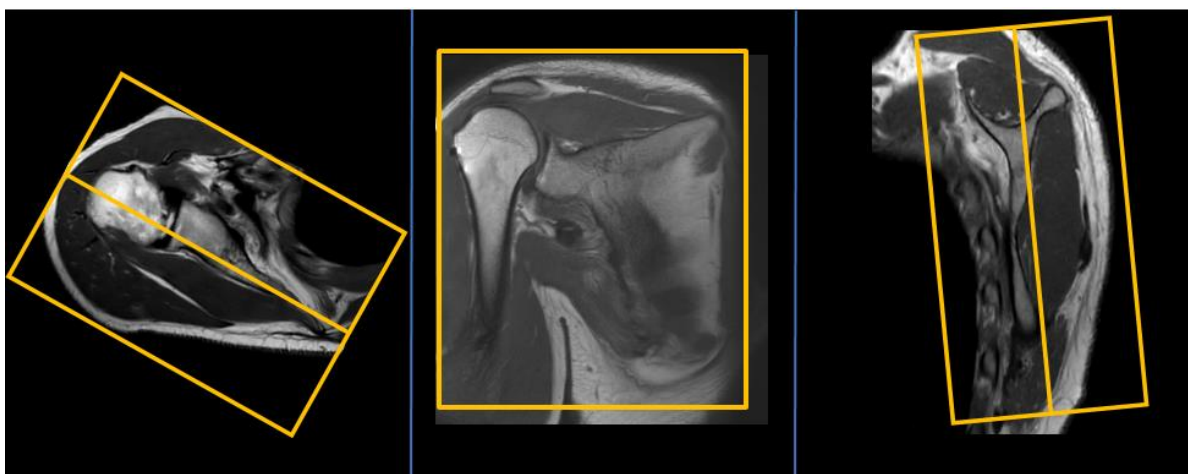

**Vinkling  
Sag**

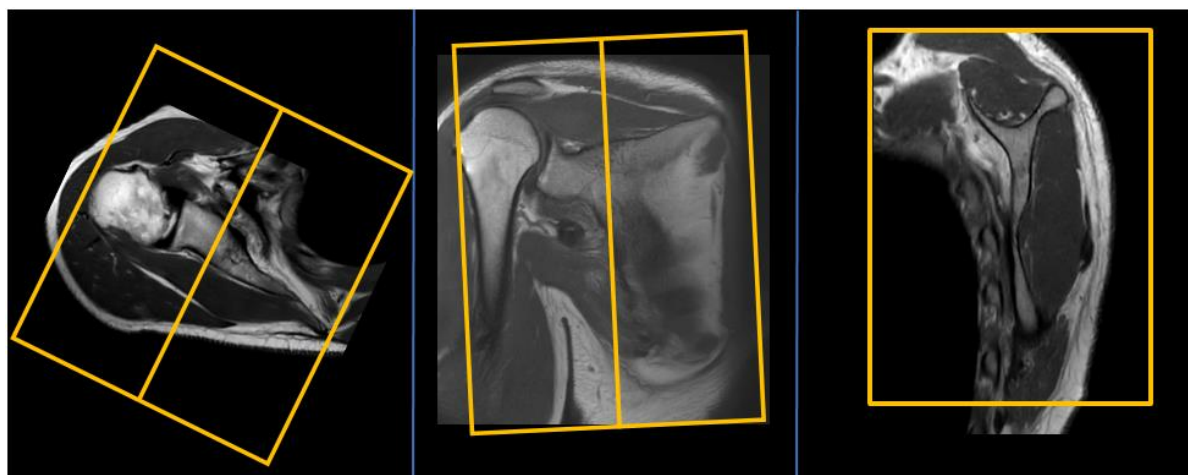

- Dokumentation:** Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss. Eventuella avsteg från rutinen rapporteras i [MedControl Pro](#). Administrerade läkemedel antecknas i AGFA.
- MR-säkerhet:** Rutin för MR-säkerhet följs i enlighet med [säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#). Vid implantat används [SU:s implantatbedömningar](#) eller ring fysikernas säkerhetstelefon på 031 342 44 17.
- Övrigt:** Vid kraftiga andningsartefakter kan saturationsband placeras över lungan. Var försiktig så att saturationsbandet ej täcker aktuella områden.
- Referenser:** [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),  
[Säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#)  
[SU:s implantatbedömningar](#)  
[Handläggning vid MR-undersökning med gadoliniumkontrastmedel](#)  
[FASS](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Linda Clausen, (lincl2),  
Specialröntgensjuksköterska

**Granskad av:** Linda Clausen, (lincl2),  
Specialröntgensjuksköterska, Maria Chatzopoulou, (march13),  
Överläkare

**Godkänd av:** Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-1694

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2026-05-17

**Giltig till:** 2028-05-12