

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Linda Clausen, (lincl2), Specialröntgensjuksköterska
Granskad av: Maria Chatzopoulou, (march13), Överläkare
Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-10

Giltig till: 2028-08-10

MR Sternoklavikularled 78A Standard

Us kod/Us namn: M78000

MR Sternoklavikularled 78A Standard

Undersökningstid: 30 min.

Indikation: Artrit, artros

Förberedelser: [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#)
och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

Patient ska bära MR-säkra kläder vid undersökning.

System: 1,5T på SU/M.

Patientpositionering: Ryggläge, huvudet först. Stöd för armarna. Hörselskydd
och larmknapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering: Jugulum.

Spole: Basecoil huvud + Anterior body coil

Kontrastmedel: nej


Kontrastinjektion: -

Läkemedel: -


Sekvenser/Kriterier:

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
1	Survey	3 plan		
2	T1 tse	Tra	3 mm.	Vinkla efter sternum. Täck båda sternoklavikularleder. Saturationsband över lungan.
3	T1 tse	Cor	3 mm.	Vinkla efter sternum. Täck båda sternoklavikularleder. Saturationsband över lungan.
4	PD SPAIR tse	Tra	3 mm.	Vinkla efter sternum. Täck båda sternoklavikularleder. Saturationsband över lungan.
5	T2 DIXON tse	Cor	3 mm.	Vinkla efter sternum. Täck båda sternoklavikularleder. Saturationsband över lungan.

**Vinkling
Tra**

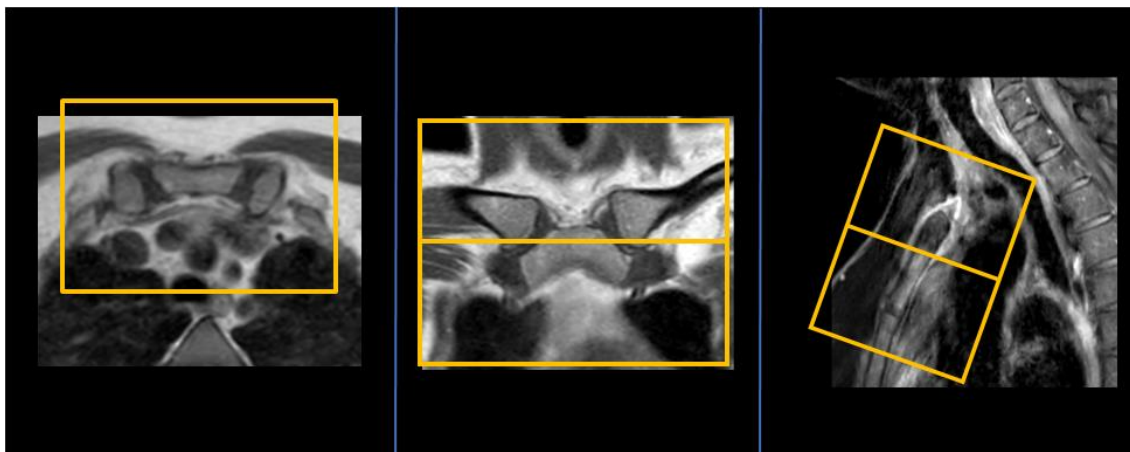

**Vinkling
Cor**

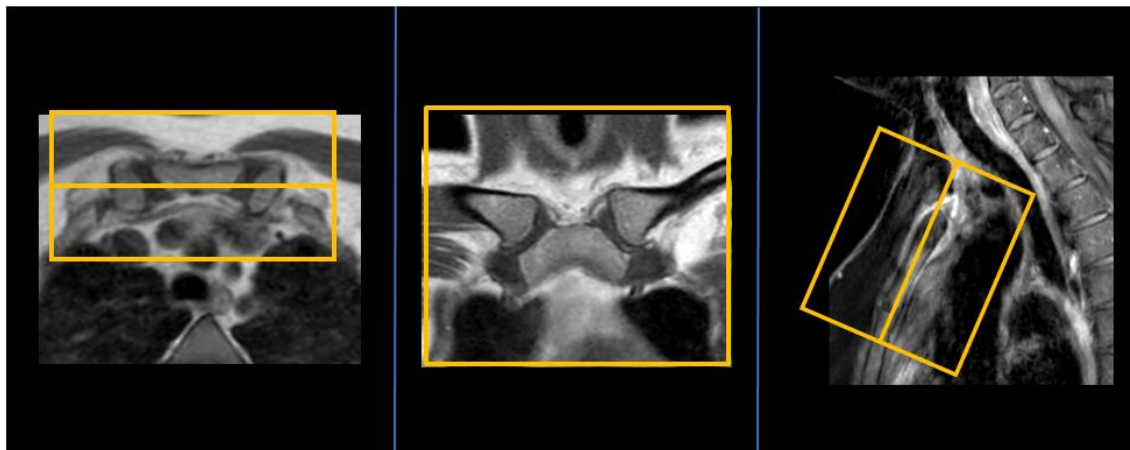

- Dokumentation:** Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss. Eventuella avsteg från rutinen rapporteras i [MedControl Pro](#). Administrerade läkemedel antecknas i AGFA.
- MR-säkerhet:** Rutin för MR-säkerhet följs i enlighet med [säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#). Vid implantat används [SU:s implantatbedömningar](#) eller ring fysikernas säkerhetstelefon på 031 342 44 17.
- Övrigt:** Detta protokoll är ofta behäftat med rörelseartefakter. Om möjligt, be patient att andas med magen i stället för bröstkorgen samt att andas lugna andetag.
- Referenser:** [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),
[Säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#)
[SU:s implantatbedömningar](#)
[KM MR-kontrastmedel \(Gadolinium\) \(vgregion.se\)](#).
[FASS](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Linda Clausen, (lincl2),
Specialröntgensjuksköterska

Granskad av: Maria Chatzopoulou, (march13), Överläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1699

Version: 4.0

Giltig från: 2026-08-10

Giltig till: 2028-08-10