

Gäller för: Verksamhet Radiologi  
Innehållsansvar: Linda Clausen, (lincl2), Specialröntgensjuksköterska  
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad  
Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-17

Giltig till: 2028-05-12

## MR Handled 66A Tumör utan Gd

**Us kod/Us namn:** M66000D, M66000S,  
MR Handled 66A Tumör utan Gd.

**Undersökningstid:** 30 minuter.

**Indikation:** Tumör där bedömning ej kräver Gd eller när patient ej klarar att få Gd.

**Förberedelser:** [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),  
och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

Patient ska bära MR-säkra kläder vid undersökning.

Markera eventuellt aktuellt område med E-vitaminkapslar.

**System:** 3T på SU/M.

**Patientpositionering:** Ryggläge, fötterna först. Armen längst med kroppen, handen placeras i handspolen med tummen uppåt. Kuddar under armbågen. För att minimera rörelse kan fingrar på aktuell hand tejpas/lindas ihop. Hörselskydd och larmknapp tilldelas samtliga patienter.

**Patientcentrering:** Mitt på handleden.

**Spole:** Handspole.  
Om patienten ej får plats i handspolen eller har gips kan small extremity coil (flexspole) användas.



**Kontrastmedel:** nej.


**Kontrastinjektion:** -

**Läkemedel:** -


**Sekvenser/Kriterier:**

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
1	Survey	3 plan	-	-
2	STIR tse	Cor	2 mm.	Vinkla boxen rakt efter radius och ulna i transversalplan. Täck aktuellt område.
3	T1 tse	Tra	2 mm.	Vinkla rakt efter handleden. Täck aktuellt område.
4	T2 tse	Tra	2 mm.	Samma som ovan.
5	PD SPAIR tse	Cor	2 mm.	Vinkla boxen rakt efter radius och ulna i transversalplan. Täck aktuellt område.
6	STIR tse	Sag	2 mm.	Vinkla boxen rakt efter radius och ulna i transversalplan. Täck hela handleden.


**Vinkling  
Tra**

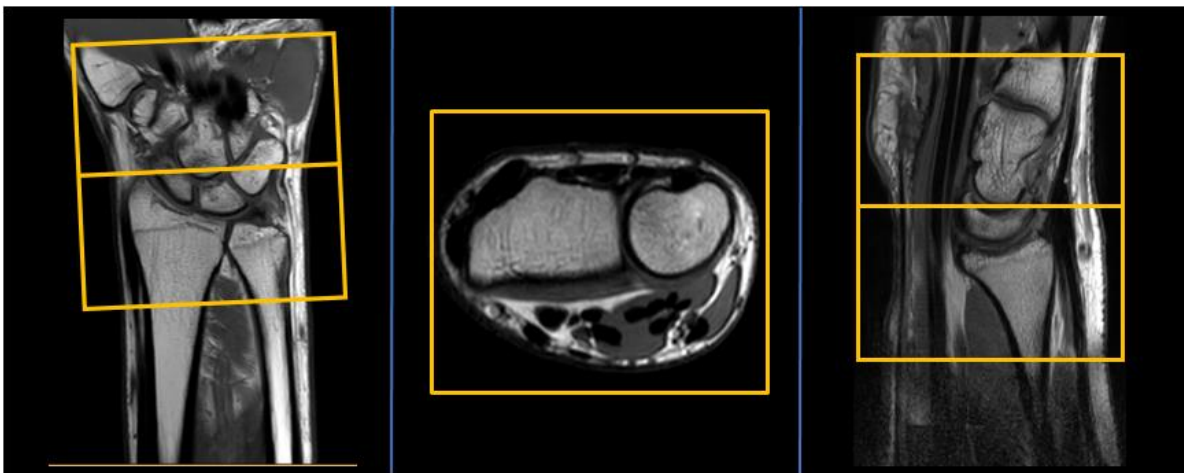

**Vinkling  
Cor**

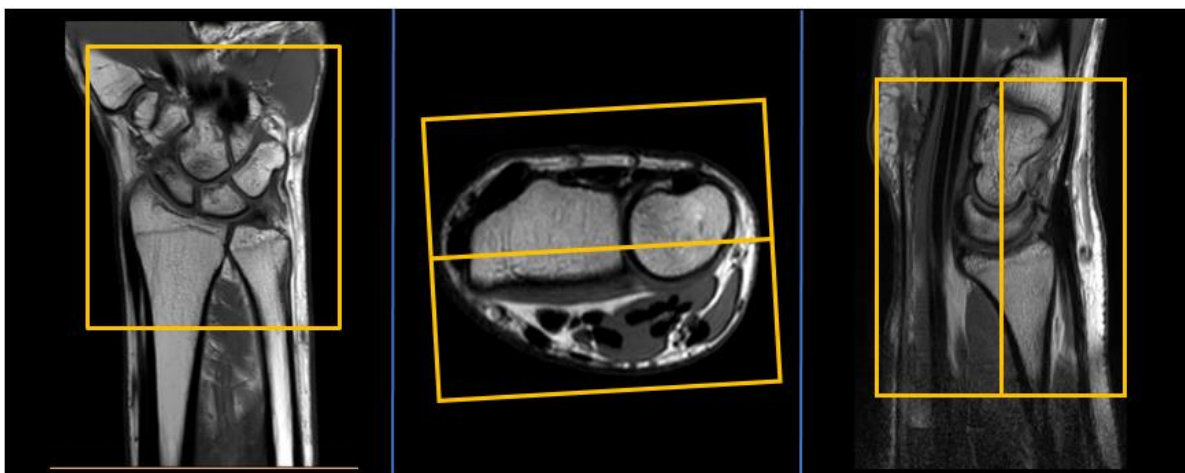

**Vinkling  
Sag**

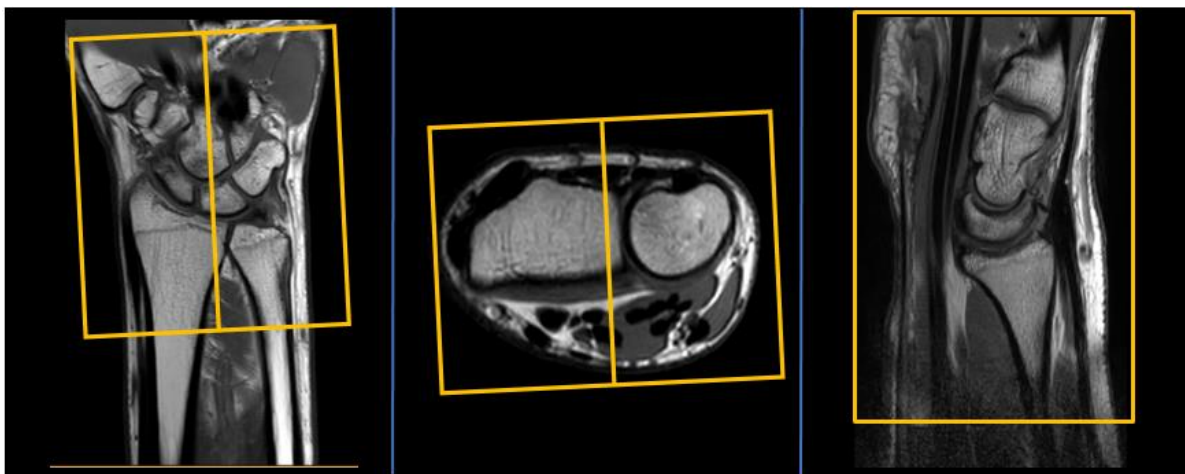

- Dokumentation:** Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss. Eventuella avsteg från rutinen rapporteras i [MedControl Pro](#). Administrerade läkemedel antecknas i AGFA.
- MR-säkerhet:** Rutin för MR-säkerhet följs i enlighet med [säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#). Vid implantat används [SU:s implantatbedömningar](#) eller ring fysikernas säkerhetstelefon på 031 342 44 17.
- Övrigt:** Om patient ej får plats på bordet kan patienten placeras liggandes lätt på sidan med handen fortsatt i handspolen. Undersökning kan även utföras med handen supine/superman-position. Alternativa spolar som kan användas är small extremity coil (flexspole) eller flexringar.
- Referenser:** [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),  
[Säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#)  
[SU:s implantatbedömningar](#)  
[Handläggning vid MR-undersökning med gadoliniumkontrastmedel](#)  
[FASS](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Linda Clausen, (lincl2),  
Specialröntgensjuksköterska

**Granskad av:** Linda Clausen, (lincl2),  
Specialröntgensjuksköterska, Maria Chatzopoulou, (march13),  
Överläkare

**Godkänd av:** Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-1763

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2026-05-17

**Giltig till:** 2028-05-12