

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Linda Clausen, (lincl2), Specialröntgensjuksköterska
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-21
Giltig till: 2028-05-12

MR Bäckén och höftled 29A Tumör utan Gd.

- Us kod/Us namn:** M29000
MR Bäckén och höftled 29A Tumör utan Gd.
- Undersökningstid:** 30 minuter.
- Indikation:** Tumör där bedömning ej kräver Gd eller när patient ej klarar att få Gd.
- Förberedelser:** [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#), och patient-ID kontrolleras inför undersökning.
- Patient ska bära MR-säkra kläder vid undersökning.
- Markera eventuellt aktuellt område med E-vitaminkapslar.
- System:** 1,5T eller 3T.
- Patientpositionering:** Ryggläge, fötterna först. Fixera benen med sandsäckar och lägg eventuellt lite stöd under knäna. Placera tyg mellan låren samt mellan hud och spole. Hörselskydd och larmknapp tilldelas samtliga patienter.
- Patientcentrering:** Mitt på bäckenet.
- Spole:** Anterior body coil.



Kontrastmedel: -


Kontrastinjektion: -

Läkemedel: -


Sekvenser/Kriterier:

| | Sekvens | Snitt-plan | Snitt-tjocklek | Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier) |
|----------|----------------|-------------------|-----------------------|---|
| 1 | Survey | 3 plan | - | - |
| 2 | STIR tse | Cor | 5 mm. | Vinkla rakt efter höftlederna. Täck bäcken/höftleder eller aktuellt område. |
| 3 | T1 tse | Tra | 5 mm. | Vinkla rakt efter kroppen. Täck bäcken/höftleder eller aktuellt område. |
| 4 | T2 tse | Tra | 5 mm. | Samma som ovan. |
| 5 | STIR tse | Sag | 5 mm. | Över aktuell sida. Vinkla rakt efter bäcken/höft och täck aktuellt område. |
| 6 | PD SPAIR tse | Sag | 3 mm. | Samma som ovan. |


Vinkling
Tra

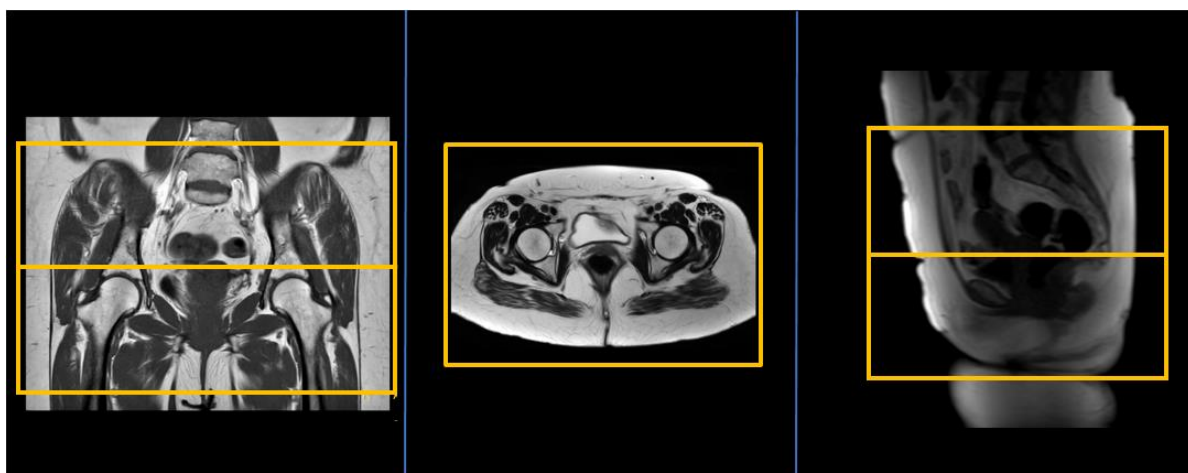

Vinkling
Cor

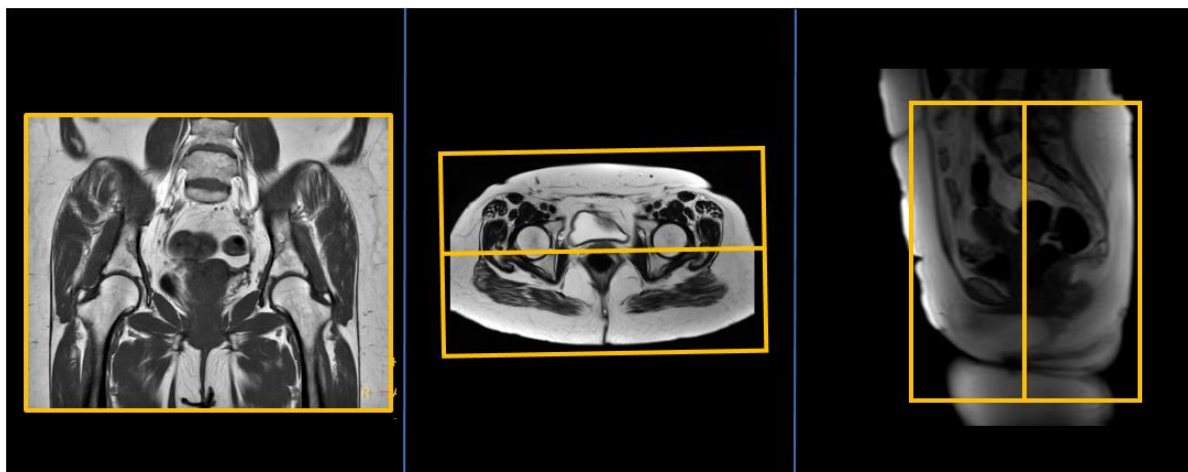

Vinkling
Sag
(över aktuell sida)

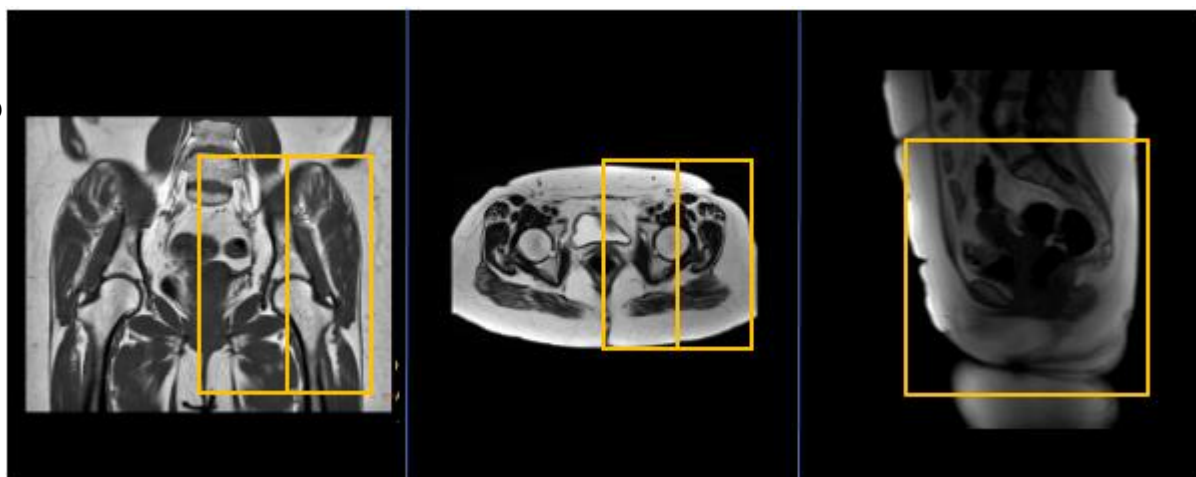

- Dokumentation:** Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss. Eventuella avsteg från rutinen rapporteras i [MedControl Pro](#). Administrerade läkemedel antecknas i AGFA.
- MR-säkerhet:** Rutin för MR-säkerhet följs i enlighet med [säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#). Vid implantat används [SU:s implantatbedömningar](#) eller ring fysikernas säkerhetstelefon på 031 342 44 17.
- Övrigt:** Det är viktigt att lägga tyg mellan hud och spole samt mellan låren för att undvika brännskador. Undvik att händerna nuddar huden vid låren. Detta för att minimera risken för brännskador.
- Referenser:** [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),
[Säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#)
[SU:s implantatbedömningar](#)
[Handläggning vid MR-undersökning med gadoliniumkontrastmedel](#)
[FASS](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Linda Clausen, (lincl2),
Specialröntgensjuksköterska

Granskad av: Linda Clausen, (lincl2),
Specialröntgensjuksköterska, Maria Chatzopoulou, (march13),
Överläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1804

Version: 3.0

Giltig från: 2026-05-21

Giltig till: 2028-05-12