

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2026-06-11

Innehållsansvar: Erica De Coursey, (eride3), Specialröntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-06-11

Godkänd av: Linda Clausen, (lincl2), Specialröntgensjuksköterska

MR Fot 72A Skelett

Us kod/Us namn: M72000D, M72000S
MR Fot 72A Skelett.

Undersökningstid: 30 minuter.

Indikation: Fraktur, osteonekros, metastas.

Förberedelser: [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),
och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

Patient ska bära MR-säkra kläder vid undersökning.

System: 3T på SU/M.

Patientpositionering: Ryggläge, fötterna först. Aktuell fot placeras i fotspolen.
Placera en kudde under fotsulan så att patientens fot är
flexad vid undersökningen. Lagg stöd under knäna.
Hörselskydd och larmknapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering: Mitt på foten.

Spole: Fotspole.



Kontrastmedel: nej.


Kontrastinjektion: nej.

Läkemedel: -


Sekvenser/Kriterier:

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
1	Survey	3 plan	-	-
2	T1 tse	Tra	2,5 mm.	Vinkla efter aktuellt område: framfot, mellanfot eller plantarfacia. Täck aktuellt område.
3	T2 DIXON tse	Cor	3 mm.	Vinkla efter aktuellt område: framfot, mellanfot eller plantarfacia. Täck aktuellt område.
4	T2 DIXON tse	Sag	3 mm.	Vinkla efter aktuellt område. Täck aktuellt område.


**Vinkling
Tra**

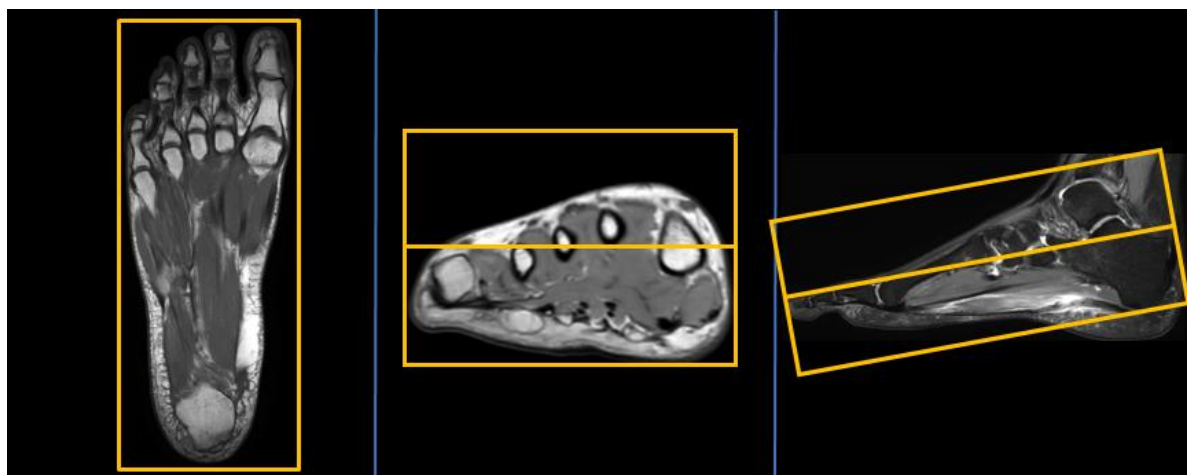

**Vinkling
Cor**

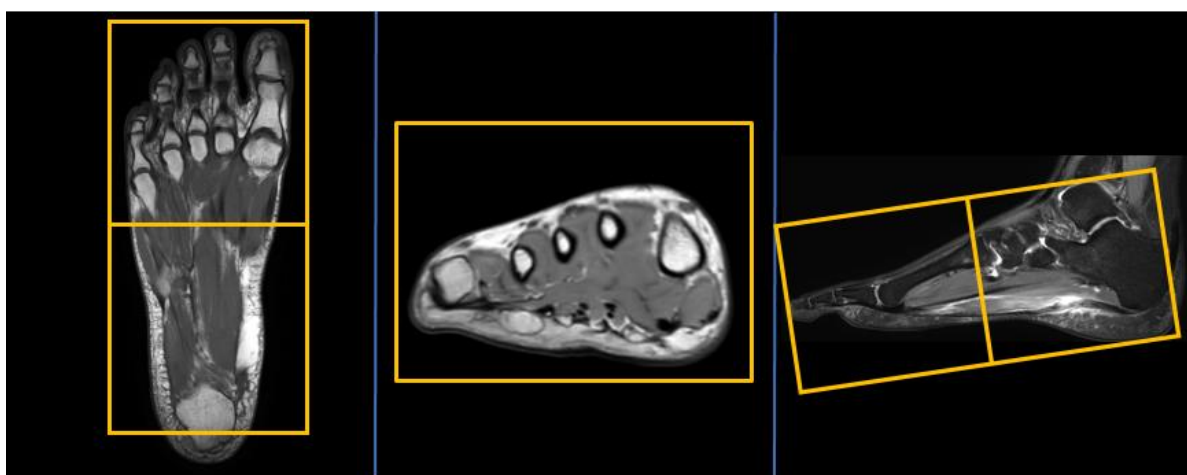

**Vinkling
Sag**

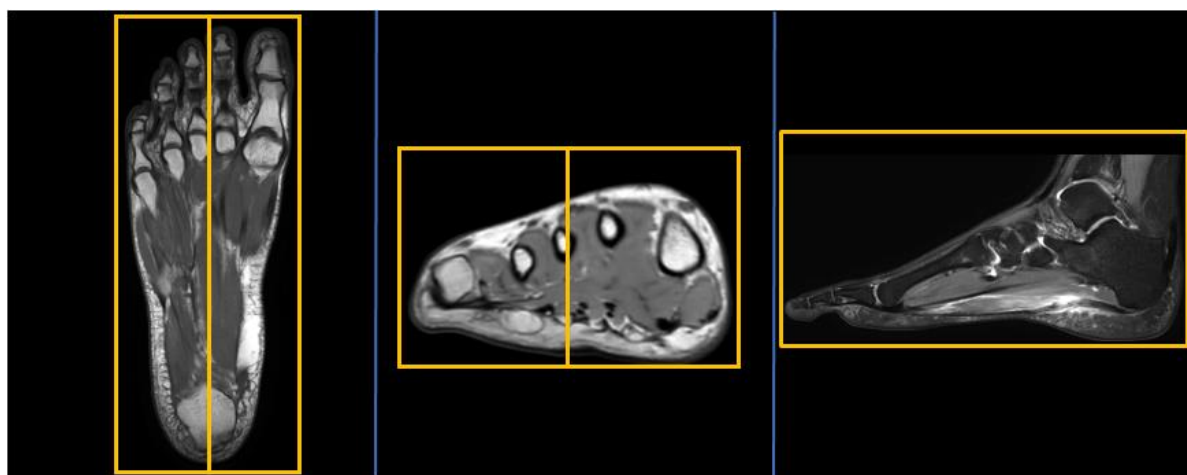

- Dokumentation:** Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss. Eventuella avsteg från rutinen rapporteras i [MedControl Pro](#). Administrerade läkemedel antecknas i AGFA.
- MR-säkerhet:** Rutin för MR-säkerhet följs i enlighet med [säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#). Vid implantat används [SU:s implantatbedömningar](#) eller ring fysikernas säkerhetstelefon på 031 342 44 17.
- Övrigt:** Om patient har gips eller av annan anledning ej får plats i fotspolen kan small extremity coil användas.
- Referenser:** [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),
[Säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#)
[SU:s implantatbedömningar](#)
[KM MR-kontrastmedel \(Gadolinium\) \(vgregion.se\)](#)
[FASS](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Erica De Coursey, (eride3),
Specialröntgensjuksköterska

Godkänd av: Linda Clausen, (lincl2),
Specialröntgensjuksköterska

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1877

Version: 4.0

Giltig från: 2026-06-11

Giltig till: 2028-06-11