

Gäller för: Verksamhet Radiologi  
Innehållsansvar: Linda Clausen, (lincl2), Specialröntgensjuksköterska  
Granskad av: Maria Chatzopoulou, (march13), Överläkare  
Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-17

Giltig till: 2028-06-11

## MR Fot 72A Tumör utan Gd

**Us kod/Us namn:** M72000D, M72000S  
MR Fot 72A Tumör utan Gd.

**Undersökningstid:** 30 minuter.

**Indikation:** Tumör där bedömning ej kräver Gd eller när patient ej klarar att få Gd.

**Förberedelser:** [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#), och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

Patient ska bära MR-säkra kläder vid undersökning.

Markera eventuellt aktuellt område med E-vitaminkapslar.

**System:** 3T på SU/M.

**Patientpositionering:** Ryggläge, fötterna först. Aktuell fot placeras i fotspolen. Placera en kudde under fotsulan så att patientens fot är flexad vid undersökningen. Lagg stöd under knäna. Hörselskydd och larmknapp tilldelas samtliga patienter.

**Patientcentrering:** Mitt på foten.

**Spole:** Fotspole.



**Kontrastmedel:** nej.


**Kontrastinjektion:** nej.

**Läkemedel:** -


**Sekvenser/Kriterier:**

	<b>Sekvens</b>	<b>Snitt-plan</b>	<b>Snitt-tjocklek</b>	<b>Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)</b>
<b>1</b>	Survey	3 plan	-	-
<b>2</b>	STIR tse	Tra	3 mm	Vinkla efter aktuellt område: framfot, mellanfot eller plantarfacia. Täck aktuellt område.
<b>3</b>	T1 tse	Cor	3 mm.	Vinkla efter aktuellt område: framfot, mellanfot eller plantarfacia. Täck aktuellt område.
<b>4</b>	T2 tse	Cor	3 mm.	Samma som ovan.
<b>5</b>	PD DIXON tse	Sag	3 mm.	Vinkla efter aktuellt område. Täck aktuellt område.
<b>6</b>	STIR tse	Sag	3 mm.	Samma som ovan.


**Vinkling  
Tra**

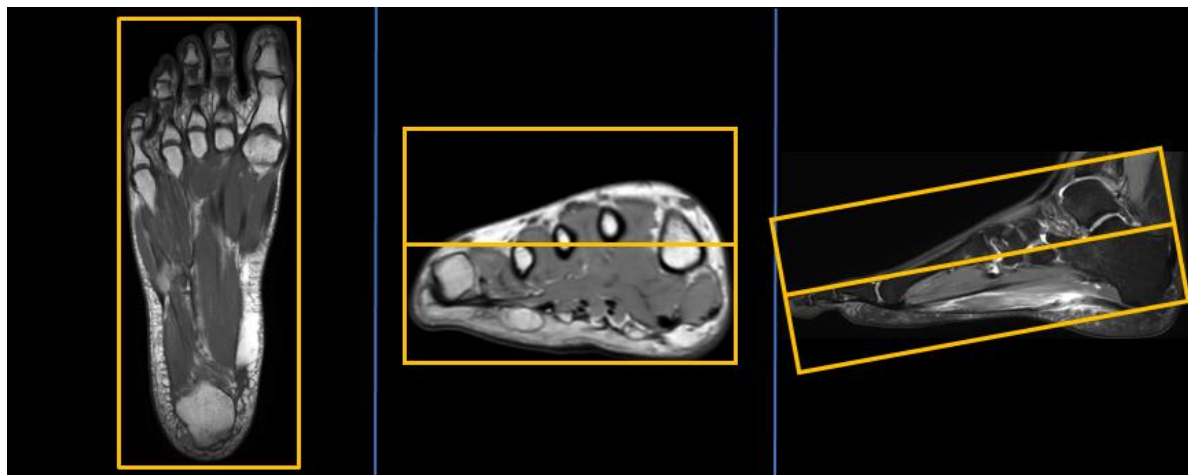

**Vinkling  
Cor**

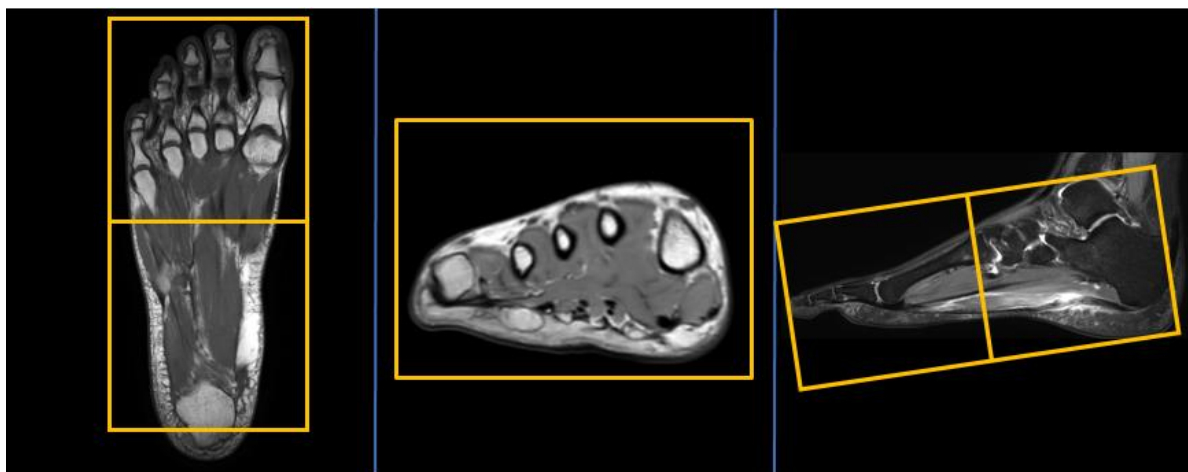

**Vinkling  
Sag**

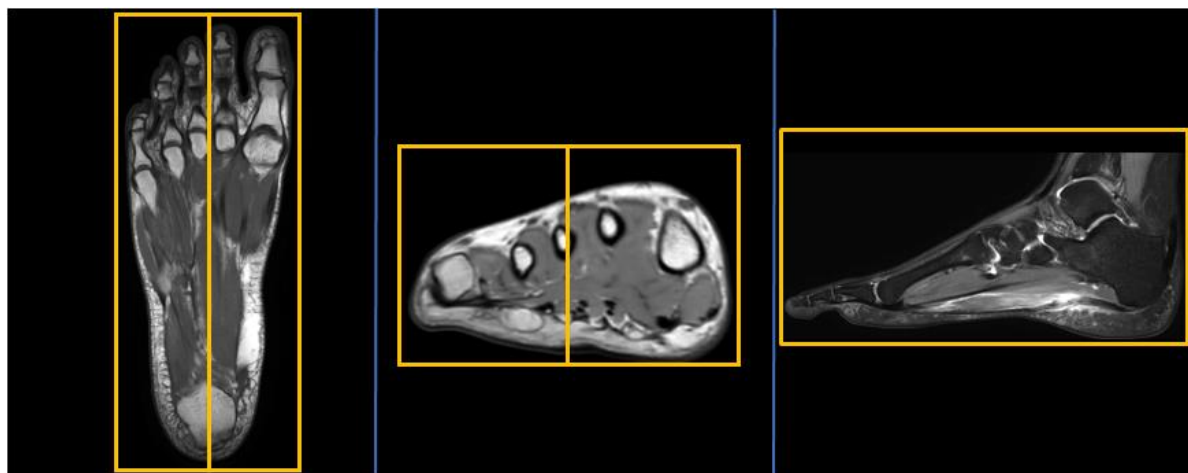

- Dokumentation:** Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss. Eventuella avsteg från rutinen rapporteras i [MedControl Pro](#). Administrerade läkemedel antecknas i AGFA.
- MR-säkerhet:** Rutin för MR-säkerhet följs i enlighet med [säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#). Vid implantat används [SU:s implantatbedömningar](#) eller ring fysikernas säkerhetstelefon på 031 342 44 17.
- Övrigt:** Om patient har gips eller av annan anledning ej får plats i fotspolen kan small extremity coil användas.
- Referenser:** [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),  
[Säkerhetshandbok för MR-verksamhet](#)  
[SU:s implantatbedömningar](#)  
[KM MR-kontrastmedel \(Gadolinium\) \(vgregion.se\)](#).  
[FASS](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Linda Clausen, (lincl2),  
Specialröntgensjuksköterska

**Granskad av:** Maria Chatzopoulou, (march13), Överläkare

**Godkänd av:** Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-1879

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2026-06-17

**Giltig till:** 2028-06-11