

Gäller för: Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-13
Giltig till: 2027-02-11

AC-Led Luxation

Us kod/Us namn 635142 – Akromioklavikularled, provokation eller belastad

Indikation Luxation

Förberedelser


- Granska remiss och ev. tidigare undersökningar
- ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet
- Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS
- Avlägsna föremål som skymmer us-området
- Kompression skall ej användas
- Graviditet skall ej tillfrågas
- Gonadskydd skall ej användas
- Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs
- Sätt sidomarkering
- Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

Kontrastmedel Nej

Bildtagning/Projektioner


Bilateral obelastad frontal

Position	Bilden tas AP. Be patienten dra bak axlarna
Centrering	i AC-leden
Vinkel	0°
Kriterier	AC-leden friprojicerad
FFA	110 cm

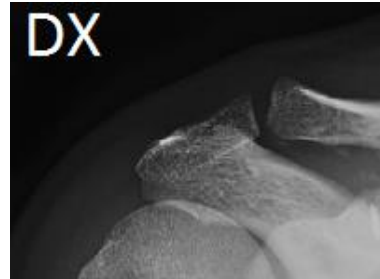

Bilateral belastad frontal (tas endast på begäran)

Position	Fraktur skall först uteslutas. Bilden tas AP. Låt patienten hålla i en sandsäck eller dylikt på ca 2 kg.
Centrering	i AC-leden
Vinkel	0°
Kriterier	AC-leden friprojicerad
FFA	110 cm

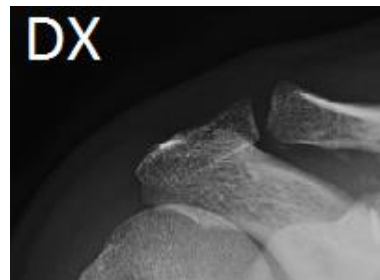

Strålskydd	Se under rubriken förberedelser
Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
Ansvar	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).
Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder Bilder skickas till BFR
Referenser	<u>Strålsäkerhet</u>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Kristina Eriksson, (krier6), Röntgenassistent

Granskad av: Andreia Miron, (andmi2), Överläkare, Carina Tordsson, (carto3), Verksamhetsutvecklare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-800

Version: 8.0

Giltig från: 2025-02-13

Giltig till: 2027-02-11