

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2025-11-03

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2027-11-03

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

T3 Thorax mk

Förändringar sedan föregående version

Uppdatering av metod i form av smart-prep-monitorering i diafragmanivå.

Metodbeskrivning


Us kod/Us namn	830800 DT thorax med iv kontrast
Indikation	Rutinundersökning vid t.ex. tumör, lymfadenopati, och metastaser.
Serieöversikt	1. Thorax mk
Förberedelser	<ul style="list-style-type: none">• Avlägsna all metall över bröstkorgen• Öva andningsinstruktioner med patienten (andas in och hålla andan)
Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet
Patientcentrering	JU/SN
Scouter	Frontal och lateral
Kontrastmedel	Omnipaque (350 mg I/ml) intravenöst
Kontrastmedelsprotokoll	Alingsås: Thorax Angered/Högsbo/Kungälv: Thorax

Injektionstid	25 sekunder
Kontrastmedels- fördröjning	Smart-prep i diafragmanivå med ROI i aorta. HU-värde 150 + 20 sekunder
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .

Scanområde/kriterier

Serie 1:

Thorax mk

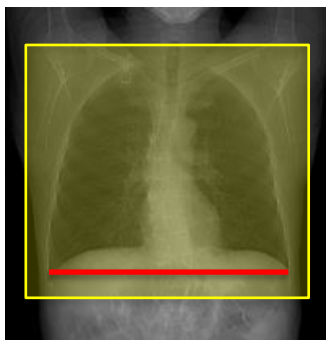

*Fr.o.m. ovan lungapex t.o.m
nedom lungsinus. Axillerna skall
vara med.*

*Smart-prep i diafragmanivå med
ROI i aorta.*

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-68

Version: 2.0

Giltig från: 2025-11-03

Giltig till: 2027-11-03