

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2025-12-19

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-12-19

Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

55E Endometrios

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.


Us kod/Us namn	M55000 MR Nedre buk
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	Endometrios, adenomyos i lilla bäckenet
Förberedelser	Kan utföras när som helst under menstruationscykeln Svält 3 tim Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka
Patientposition	Pat ligger på rygg med fötterna först. Kudde under knän om så önskas.
Centrering	Bäckenskovel
Spole	Anterior

Kontrastmedel	
Läkemedel	
Efterbearbetning	
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417


Sekvenser/kriterier

Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)
Survey			
T2	SAG	4mm	Lilla bäckenet
T2	TRA	4mm	Promotorium till symfysen
T2	COR	4mm	Lilla bäckenet
T1 Dixon IOW	SAG	5mm	Som ovan. Ej sattband framtill (bukvägg viktig)
T1 Dixon IOW	TRA	5mm	Som ovan
Tillval			
T2 Haste/ssfs e	COR	5mm	Hydronefros frågeställning

SAG

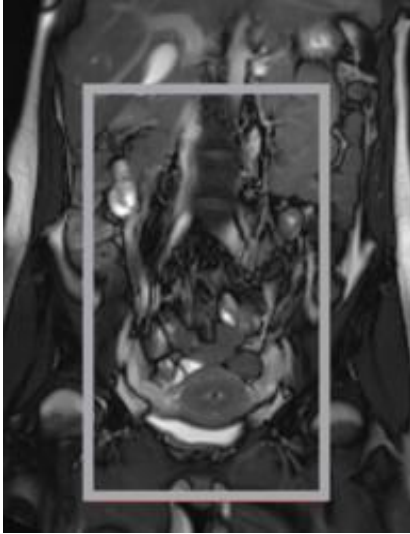

TRA

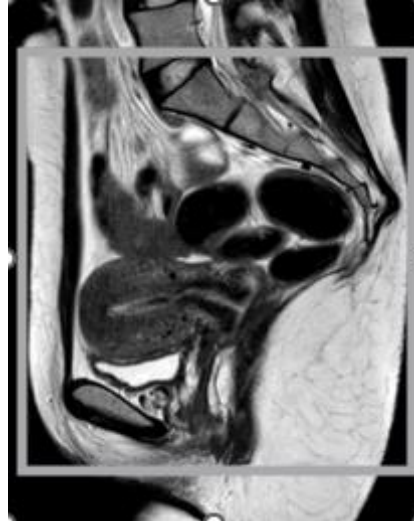

Hängningsprotokoll

1 Ny undersökning

T2 sag	T2 cor	T1 sag	sag	sag
T2 tra		T1 tra	tra	tra

1 Ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

T2 sag	T2 cor	T2 tra
T1 sag	T1 sag	T1 sag
T1 tra	T1 tra	T1 tra

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-28

Version: 1.0

Giltig från: 2025-12-19

Giltig till: 2027-12-19